

www.bioxa.fr

LABORATOIRES

- **BEZANNES**
119 rue Victor de Broglie
51430 BEZANNES
Tél : 03.26.06.02.06
Fax : 03.26.06.12.75

- **CHAMP DE MARS**
1 place du Docteur Knoeri
51100 REIMS
Tél : 03.26.02.48.48
Fax : 03.26.07.54.90

- **CHATILLONS**
4 rue Magellan
51100 REIMS
Tél : 03.26.06.03.15
Fax : 03.26.05.86.40

- **CLAIRMARAIS**
28 rue André Pingat
51100 REIMS
Tél : 03.26.47.90.73
Fax : 03.26.47.27.54

- **COURS LANGLET**
23 cours Langlet
51100 REIMS
Tél : 03.26.85.86.87
Fax : 03.26.47.63.33

- **La HALLE**
26 rue Léon Jolly
51120 SEZANNE
Tél : 03.26.80.61.96
Fax : 03.26.81.35.80

- **La MUIRE**
14 avenue du 29 Août 1944
51430 TINQUEUX
Tél : 03.26.87.78.00
Fax : 03.26.87.78.08

- **LAPSIEN**
47 bis rue de Chativesle
51100 REIMS
Tél : 03.26.40.52.44
Fax : 03.26.47.32.55

- **PAUL CHANDON**
27 avenue Paul Chandon
51200 EPERNAY
Tél : 03.26.56.55.00
Fax : 03.26.55.97.96

- **POMMERY**
67 A, boulevard Pommery
51100 REIMS
Tél : 03.26.07.07.40
Fax : 03.26.07.07.90

- **PORTE DE PARIS**
27 rue du Colonel Fabien
51100 REIMS
Tél : 03.26.04.07.89
Fax : 03.26.08.76.50

MANUEL

DE

PRELEVEMENT



Scanner pour télécharger l'appli

REDIGE LE 30/06/22

REVISION	
<i>Nature des modifications (signalées par le symbole ✍ dans la marge)</i>	Pages
Mise à jour de la liste des kits avec notamment l'ajout des kits salivaires Covid et la suppression des kits pour la recherche de drogues urinaires	5
Suppression de la disponibilité de la liste des examens réalisés par le laboratoire sur le site internet. Disponible sur l'application mobile Bioxa.	6
Traitements : ajout précisions HNF / HBPM	7
Partie 5.1.2.3 Nombre de tubes	9
Prélèvements à transmettre rapidement au laboratoire : ajout du prélèvement pour la recherche de paludisme / VS à transmettre dans les 4h au lieu de 6h	12
Modification de la Fiche de recueil d'urines pour ECBU	13
Volume des urines pour recherche de Chlamydiae et Mycoplasmes : 10 à 30 ml	14
Urine pour recherche de toxiques urinaires : Exclusivement au laboratoire	14
Recherche de Mycoplasmes : Suppression de la conservation des urines au réfrigérateur avant transmission	14
Hémocultures : Ajout de : « Proscrire les hémocultures solitaires. Le volume nécessaire à la sensibilité de détection est de 40 à 60 ml par épisode, donc au moins 2 hémocultures et idéalement 3 ».	15
Modification de la partie sur les zones d'étiquetage des Hémocultures	16
Suppression de la partie « Recherche de Chlamydiae génitaux » (<i>changement de technique → prélèvement sur E-swab</i>)	17
Prélèvement Frottis de dépistage et HPV	17
Prélèvements nasopharyngés COVID : suppression du 2 ^{ème} sachet	17
Ajout des prélèvements salivaires COVID	17
Identification des échantillons : Ajout « Le Nom de naissance doit être également mentionné en cas de groupe sanguin / RAI. »	18
Renseignements et documents d'accompagnement des prélèvements : suppression de la disponibilité de la liste des examens réalisés par le laboratoire sur le site internet. Disponible sur l'application mobile Bioxa.	19
Modification du § 5.1.5	19
Hygiène et sécurité : Ajout « Ne pas laisser l'aiguille dans le sachet »	20
Délai de transmission : – Ajout Cotinine : 2 à 8°C – 48h – Hémocultures : modification du délai maximum acceptable → 24h	22
Délai disponible sur l'application mobile Bioxa	
Transmission au laboratoire : le caractère d'urgence technique est spécifié sur l'application mobile Bioxa (la liste détaillée des analyses n'est plus disponible sur le site internet).	22
Ajout Annexe 3 : Prélèvement pour recherche d'HPV et/ou frottis cervico utérin	25
Annexe 4 : Ordre de prélèvement	26

SOMMAIRE

1	Objet et domaine d'application.....	4
1.1	Objet.....	4
1.2	Domaine d'application.....	4
2	Définitions et abréviations	4
3	Documents associés	4
4	Personnes concernées.....	5
5	Déroulement de l'activité	5
5.1	Prélèvement.....	5
5.1.1	Le matériel.....	5
5.1.2	Réalisation des prélèvements.....	6
5.1.2.1	Prélèvements sanguins	6
5.1.2.1.1	<i>Importance du jeûne et des heures de prélèvement.....</i>	<i>6</i>
5.1.2.1.2	<i>Récapitulatif des tubes de prélèvement à utiliser pour les analyses les plus courantes</i>	<i>8</i>
5.1.2.1.3	<i>Nombre de tubes.....</i>	<i>9</i>
5.1.2.1.4	<i>Conservation des prélèvements.....</i>	<i>12</i>
5.1.2.2	Les urines.....	13
5.1.2.3	Autres prélèvements bactériologiques	15
5.1.3	Identification des échantillons	18
5.1.4	Renseignements et documents d'accompagnement des prélèvements.....	18
5.1.5	Cas des Groupe sanguin / RAI	19
5.1.6	Hygiène et sécurité.....	20
5.2	Conservation des prélèvements avant leur prise en charge par le laboratoire	21
5.2.1	Prélèvements sanguins	21
5.2.2	Urines.....	21
5.2.3	Selles.....	21
5.2.4	Prélèvements bactériologiques (génitaux, pus...)	21
5.2.5	Tableau récapitulatif des délais de transmission.....	22
5.3	Transmission au laboratoire.....	22
	ANNEXE 1 : JO du 02/05/2002 - Décret 2002-660 du 30/04/2002.....	23
	ANNEXE 2 : Mode d'emploi des E-SWAB	24
	ANNEXE 3 : Prélèvement pour recherche de papillomavirus oncogènes (HPV) et/ou frottis cervico utérin	25
	ANNEXE 4 : Ordre de prélèvement (Tubes plastique)	26

1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

1.1 Objet

En application du décret n°2002-660 du 30/04/2002 (cf. annexe 1), la présente procédure a pour objet de préciser les obligations qui s'imposent aux professionnels de santé **externes** à l'occasion du prélèvement, de la conservation et de la transmission d'échantillons biologiques destinés au laboratoire.

1.2 Domaine d'application

Prélèvements biologiques réalisés et/ou transmis par des professionnels de santé **externes au laboratoire**.

2 DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

ECBU = Examen Cyto Bactériologique des Urines

DDN = Date De Naissance

DMP = Dossier Médical Partagé

3 DOCUMENTS ASSOCIES

Bibliographie :

- ☞ *Recommandations pour l'accréditation des laboratoires de biologie médicale de la SFBC, Hors série (n°1) des Annales de Biologie Clinique → SEL – DIV/QUA/005*
- ☞ *Norme NF EN ISO 15189 : Laboratoire de Biologie Médicale – Exigences concernant la qualité et la compétence → SEL – DIV/QUA/009*
- ☞ *Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale → SEL – DIV/QUA/012*
- ☞ *Décret n°2002-660 du 30/04/2002 relatif aux conditions de transmission de prélèvements biologiques aux laboratoires d'analyses de biologie médicale → SEL – DIV/QUA/019*
- ☞ *Arrêté du 15 mai 2018 fixant les conditions de réalisation des examens de biologie médicale d'immunohématologie érythrocytaire → SEL – DIV/IMH/003*

Documents du laboratoire :

- ☞ *Bons de commande de fournitures pour les correspondants → SEL – ENR/LOG/043, SEL – ENR/LOG/047 et SEL – ENR/LOG/001*
- ☞ *Tournées de ramassage → SEL – ENR/LOG/...*
- ☞ *Fiche de prélèvement → SEL – ENR/PRE/006*
- ☞ *Recueil d'urines pour ECBU → SEL – ENR/PRE/015*
- ☞ *Prélèvement nasopharyngé pour recherche de COVID-19 → SEL – ENR/PRE/031*
- ☞ *Protocole Test de Dépistage COVID-19 : Recueil Salivaire pour RT-PCR → SEL – ENR/PRE/034*
- ☞ *Gestion des non-conformités et réclamations → SEL – PRO/QUA/005*
- ☞ *Critères de conformité d'une demande d'analyses - Analyses fragiles → SEL – SPE/QUA/002*
- ☞ *Bons de commande de matériel spécifiques aux établissements de soins*

4 PERSONNES CONCERNEES

- ✓ Professionnels de santé (infirmiers, médecins, centres de soins, ...) effectuant des prélèvements à l'extérieur du laboratoire pour les transmettre à ce dernier
- ✓ Pharmaciens transmettant des échantillons biologiques au laboratoire
- ✓ Personnel du laboratoire réceptionnant les prélèvements, Biologistes

5 DEROULEMENT DE L'ACTIVITE

Préambule : Le laboratoire prend en charge des échantillons biologiques destinés à être analysés par ses soins ou transmis à des laboratoires spécialisés, y compris lorsque ces échantillons n'ont pas été prélevés par ses soins. Cela n'est possible que si les étapes préliminaires de prélèvement et de stockage sont réalisées conformément aux directives qui suivent :

5.1 Prélèvement

5.1.1 Le matériel

Le laboratoire fournit l'ensemble du matériel requis pour les différents prélèvements :

➤ **Sanguins :** Sont fournis **tubes** (tubes gris, jaune, bleu, violet, neutre), **aiguille / corps de vacutainer**, kit d'hygiène (coton, pansement et désinfectant), et **fiche de renseignements** vierge, ainsi que des **boîtes en plastique rigides avec absorbant** pour le transport, complétées par des sachets s'il s'agit de boîtes non individuelles.

Des tubes spéciaux (CTAD (bleu clair), héparine sans gel (vert foncé), etc.) sont également disponibles sur simple demande auprès des laboratoires.

➤ **Kits pour autres examens :** Le laboratoire fournit sur demande les kits suivants :

- Kit pour frottis cervico-vaginal et HPV
- Kit de prélèvement bactériologique E-swab
- Kit de prélèvement bactériologique – Expectoration - Liquide de ponction - Autres prélèvements +/- solides
- Kit Mycobactérie sur urines (BK)
- Kit ECBU
- Kit ECBU pédiatrique
- Kit de recueil d'urines de 24 heures ou 12 heures
- Kit de recueil d'urines sur échantillon : Chimie urinaire (protéinurie, glycosurie, acide urique, etc.) ou Recherches qualitatives (sang, cotinines, pH, etc.)
- Kit de recueil d'urines pour débit HLM
- Kit cytologie urinaire
- Kit biopsie
- Kit de recueil de selles sur échantillon : Coproculture + parasito ; Porphyrine dans les selles ; Recherche de sang dans les selles (nombre de kits selon la prescription)
- Kit coprologie fonctionnelle sur 24H
- Scotch test de Graham
- Kit hémoculture
- Kit recherche de COVID-19 (prélèvement nasopharyngé)
- Kit recherche de COVID-19 (prélèvement salivaire)

Tous sont accompagnés de fiches de renseignements (identité, adresse, traitement antibiotique éventuel ...) **qu'il convient de remplir au mieux.**

Ce matériel de prélèvement doit être conservé à une température comprise entre +4 et +25°C (sauf cas particulier signalé par le laboratoire, exemple = kit hémoculture à conserver **à l'abri de la lumière**), des températures extrêmes pouvant compromettre la qualité de ce matériel et donc de l'échantillon qui sera prélevé avec.

5.1.2 Réalisation des prélèvements

Remarque : La liste complète des examens réalisés par le laboratoire est disponible sur l'application pour Smartphone, associant les examens transmis à certains laboratoires spécialisés.

Y sont indiqués entre autres les tubes de prélèvement à utiliser, et quand cela est possible, le ou les tubes de remplacement utilisable(s) en cas de difficulté de prélèvement, ainsi que les particularités propres à certaines analyses.

5.1.2.1 Prélèvements sanguins

5.1.2.1.1 Importance du jeûne et des heures de prélèvement

- Les analyses à faire à jeun sont :

Acides aminés
Acides biliaires
Acides gras à longues chaînes - C16 à C22:6
Acides gras à très longues chaînes - C22 à C26
Acides gras libres non estérifiés
Acide méthylmalonique
Acide oxalique
Anticorps anti Transglutaminase
Apolipoprotéine A1 / Apolipoprotéine B
Apolipoprotéine E
Carnitine libre et totale
Catécholamines
Cholestérol
Cholestérol HDL 2 - HDL 3
Cholestérol LDL direct
Citrulline
Fer - capacité totale de fixation - coefficient de saturation (<i>Attention, déclenché par une ferritine élevée → ferritine recommandée à jeun</i>)
Cross-laps (CTX)
Cryoglobulines
Cystine
Dérivés méthyloxyés des catécholamines
Eau libre - clairance
Expectoration

FIBROMAX
Fibromètre
Fibrotest
Fibrotest - Actitest
Gastrine
GH - Hormone de croissance
Glycémie à jeun
Glycine
Helicobacter pylori, recherche (test à l'uréase)
HOMA - index
Homocystéine
Insuline
Isoleucine
Juvenalis
Méthionine
Peptide C
Phénylalanine
Phosphore : taux de réabsorption tubulaire
Télopeptides N-terminal collagène I (NTX)
Testostérone biodisponible
Triglycérides
Tubage gastrique → le matin si possible
Tyrosine
Xylose

RAPPEL : à jeun signifie ne rien ingérer pendant au moins 10 heures avant le prélèvement (un verre d'eau toléré (sauf exception, exemple = Helicobacter jeûne strict pas d'eau, pas de café))

- Analyses nécessitant le respect d'un horaire :

Examens	Conditions particulières
ACTH	Concentration maximale le matin
Aldostérone	Régime alimentaire : valeurs de référence valables qu'en régime normosodé (80-250 mmol / 24 heures de natriurèse) Concentration maximale le matin
Corticostérone : composé B	Concentration maximale le matin
Cortisol	Concentration maximale le matin Le cycle du cortisol est inversé chez le travailleur en poste de nuit Le stress augmente le cortisol qui ne doit pas être prescrit avant 24 heures d'hospitalisation
Désoxypyridinoline	Concentration maximale le soir ou la nuit. En cas de prescriptions renouvelées, l'heure de recueil devra être toujours la même
Déhydroépiandrostérone (DHEA)	Concentration maximale le matin
Prolactine	Prélèvement entre 8 et 12h (taux minimal) chez un sujet reposé et non stressé, en début de cycle chez la femme, à distance d'un traitement médicamenteux (antagonistes dopaminergiques, psychotropes, etc.)
Parathormone (PTH)	Prélèvement de préférence le matin (concentration maximale entre 14h et 16h)
Sulfate de prégnénone	Concentration maximale le matin
11-désoxycorticostérone	Concentration maximale le matin
11-désoxycortisol : composé S	Concentration maximale le matin
17-hydroxy prégnénone	Concentration maximale le matin
21-désoxycortisol	Concentration maximale le matin

Selon les traitements :

- TCA :

- Calciparine → 2 injections → Prélever 6h après la 1^{ère} injection
 → 3 injections → 4h après la 1^{ère} injection } HNF
- Héparine → 3 à 4h après la mise sous héparine } HNF
- Lovenox, Fraxmine, Fraxi, Fraxodi, Innohep, Arixtra → Pas de délai } HBPM

- Héparinémie ou anti-XA :

- Héparine → Prélever 3 à 4h après la mise sous héparine } HNF
- Calciparine → 2 injections → 6h après la 1^{ère} injection
 → 3 injections → 4h après la 1^{ère} injection } HNF
- Fraxmine, Fraxodi → si possible 3 à 4h après injection } HBPM
- Lovenox, Fraxi → 4h après la 3^{ème} injection } HBPM
- Innohep → 4h après l'injection } HBPM

Remarque :

En cas d'épreuve en plusieurs temps comme une hyperglycémie provoquée, envoyer le patient au laboratoire, ou si vraiment impossible, demander au laboratoire la procédure à suivre pour la réaliser à domicile.

5.1.2.1.2 Récapitulatif des tubes de prélèvement à utiliser pour les analyses les plus courantes

Examens	<u>Tube à prélever en Domicile</u>	<u>Tube à prélever en Clinique</u>
Glycémie	GRIS Acceptable : JAUNE <i>si réception au laboratoire ≤ 2h</i>	GRIS Acceptable : VERT <i>si réception au laboratoire ≤ 2h</i>
Chimie (cholestérol, etc. et Ionogramme / Potassium / Troponine)	JAUNE Acceptable : A voir selon l'examen (cf. Appli. Bioxa, ou Plaquette des principaux examens)	VERT Acceptable : A voir selon l'examen (cf. Appli. Bioxa, ou Plaquette des principaux examens)
Hormonologie (Thyroïde / Fertilité...)	JAUNE Acceptable : A voir selon l'examen (cf. Appli. Bioxa, ou Plaquette des principaux examens)	JAUNE Acceptable : A voir selon l'examen (cf. Appli. Bioxa, ou Plaquette des principaux examens)
Hématologie (formule sanguine, ...) Immunohématologie	VIOLET	
Coagulation (TP...)	BLEU (citrate) Acceptable : CTAD pour TCA / AXA patients sous héparine non fractionnée (calciparine, héparine...)	
Exemple de cas particuliers		
Métaux	Tubes héparinate de sodium spéciaux fournis par Biomnis	
Caryotype	VERT <u>sans gel</u>	

En règle générale, chaque fois que cela est possible, il est demandé de remplir **complètement** les tubes, **surtout le tube pour la coagulation** (→ attendre impérativement qu'il se remplisse jusqu'à l'indicateur de remplissage (trait ou triangle selon le tube)). Pour cela, **en cas de prélèvement avec ailette**, utiliser le tube neutre (à bouchon blanc/transparent) pour **réaliser une purge** en début de prélèvement (le remplir de quelques gouttes suffit).

L'ordre de remplissage est celui précisé en annexe 4.

La pose du garrot doit être **minimale (< 1 min)**.

Agiter ensuite les tubes par **retournements successifs** (5 à 6 fois).

Toute difficulté majeure de prélèvement devra être signalée sur la feuille de renseignements.

5.1.2.1.3 Nombre de tubes

a) Exemple

Chaque ordonnance ou chaque partie d'ordonnancier ALD (Affection de Longue Durée) doit être tracée par un dossier et transmis à la sécurité sociale avec les codes d'exonération adaptés.

Pour éviter tout risque d'erreurs de manipulation, **il convient de prélever le nombre de tubes dédiés par ordonnance ou par partie d'ordonnancier.**

Si un patient vous présente les ordonnances suivantes, merci de prélever les tubes suivants :

Ordonnance N°1 :

Docteur
DE LA FACULTE DE MEDECINE DE REIMS

4 Jrcelles
51100 Reims
Tél. : ()
Consultati
En cas d'urgence - tél : 15



CABINET MEDICAL

MEDECINE GENERALE

Reims, le 09/12/2021

NFS, plaq → 1 EDTA (VIOLET)

NFS plaq

creat
GAJ

EAL
ASAT ALAT GGT
ferritine
CRP
Electrophorese proteines seriques
calcemie, magnesemie

Reims, le 09/12/2021
Creat, EAL, ASAT, ALAT, GGT,
Ferritine, CRP, Calcémie,
magnesemie
→ 1 tube sec gel (JAUNE)

Électrophorèse protéines sériques
→ 1 tube sec gel (JAUNE)

Sérologie VIH, VHB, VHC, TPHA
→ 1 tube sec gel (JAUNE)

Sérologie VIH, VHB, VHC, TPHA

GAJ (Glycémie à jeun)
→ 1 tube gris



Membre d'une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté.

01

Ordonnance N°2 :



n° 14465*01

Ordonnance bizona

Articles L. 322-3, 3° et 4°, L. 324-1 et R. 161-45 du Code de la sécurité sociale.

Identification du prescripteur <i>(nom, prénom et identité)</i>	Identification de la structure <i>(raison sociale du cabinet, de l'établissement n° AM, P/ESS ou SIRET)</i>
Docteur	
51100 RFIMS	
Identification du patient <i>(nom de famille (de naissance) suivi du nom d'usage (s'il y a lieu) tel qu'inscrit sur le prescripteur)</i>	
U W <i>n° d'immatriculation (à compléter par l'assuré(e))</i>	

Prescriptions relatives au traitement de l'affection de longue durée reconnue (liste ou hors liste)
(AFFECTION EXONÉRANTE)

Ionogramme

à domicile
par IDE

Au niveau de la partie ALD 100% :
Ionogramme → 1 tube jaune

Prescriptions SANS RAPPORT avec l'affection de longue durée
(MALADIES INTERCURRENTES)

02/03/2022

TSH us

Au niveau de la partie sans rapport
avec une ALD :
TSH → 1 tube jaune

Ces jours-ci

Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration est passible de pénalités financières, d'amende et/ou d'emprisonnement (articles 313-1 à 313-3, 441-1 et 441-6 du Code pénal, article L. 162-1-14 du Code de la sécurité sociale).

IMP. COSTE AUBRENAS

S 3321

En résumé pour les deux ordonnances, il faudra un total de :

- 5 tubes sec gel (JAUNE)
- 1 tube EDTA (VIOLET)
- 1 tube fluorure (GRIS)

b) Rappel des analyses nécessitant le prélèvement de tubes sec gel (JAUNE) supplémentaires

- ✓ Chimie + immuno-enzymologie (sérologies sur la plaquette BIOXA) sur une ordonnance → 2 tubes sec avec gel (JAUNE)
- ✓ Anticorps anti nucléaires et autres auto-anticorps → 1 tube sec gel (JAUNE) dédié pour retransmission
- ✓ Électrophorèse → 1 tube sec gel (JAUNE) dédié car cette analyse nécessite un grand volume de sérum
- ✓ IgE spécifiques, Anti récepteur TSH → 1 tube sec gel (JAUNE) dédié pour transmission sur un des sites BIOXA
- ✓ Sérologies : Herpès, Parvovirus, Oreillons, Coqueluche, Grippe, etc. → 1 tube sec gel dédié par sérologie retransmise (absente de la plaquette BIOXA)
- ✓ Hormonologie : Testostérone libre et biodisponible, 17OHProgestérone, AMH, Inhibine B, etc. → 1 tube sec gel par analyse retransmise (absente de la plaquette BIOXA)

c) Rappel des analyses nécessitant le prélèvement de tubes citrates (BLEU) supplémentaires

- ✓ Plaquettes : en cas de demande de dosage des plaquettes sur citrate, prélever 1 tube citrate (BLEU) + 1 tube EDTA pour le reste de la numération
- ✓ ACC : prélever 3 tubes citrate (BLEU) ; 2 dans les cliniques

d) Rappel des analyses nécessitant le prélèvement d'un tube EDTA (VIOLET) supplémentaire

- ✓ NFS, VS, Réticulocytes, Kleihauer, recherche de Paludisme, Hémoglobine A1c → 1 tube EDTA (VIOLET) commun
- ✓ Groupe sanguin, RAI, test de Coombs → 1 tube EDTA (VIOLET) par détermination (avec nom d'usage, nom de naissance, prénom et date de naissance sur le tube)
- ✓ Folates globulaires → 1 tube EDTA (VIOLET) dédié non cumulable avec d'autres analyses
- ✓ BNP / PTH → 1 tube EDTA (VIOLET) dédié non cumulable avec d'autres analyses (prétraitement différent)
- ✓ Analyse transmise à un sous-traitant (CD3/4/8 ; Tacrolimus / sérolimus ; HLAB27 ; Charge virale HIV ; Facteur V Leiden, etc. → 1 ou plusieurs tubes EDTA (VIOLET) dédiés par analyse selon l'application BIOXA
- ✓ Immunophénotypage → **2 tubes EDTA (VIOLET) systématiquement**

5.1.2.1.4 Conservation des prélèvements

Certains prélèvements ne peuvent pas être réalisés au domicile du patient pour des raisons de délai et/ou de température de transmission notamment ; le patient doit dans ce cas impérativement être orienté vers le laboratoire. C'est le cas des analyses suivantes :

- Agglutinines froides, Cryoglobulines (transport rapide et au chaud),
- Calcium ionisé, Gaz du sang (transport rapide et au froid),
- Homocystéine, Cryofibrinogène,
- Recherche d'amibes dans les selles, Lithium sérique, NSE (*si exceptionnellement prélèvement à domicile, à ramener **immédiatement** au laboratoire*),

Ainsi que de certaines analyses spécialisées transmises à un laboratoire sous-traitant et qui doivent être congelées rapidement (**analyses indiquées sur l'application mobile Bioxa** ; en cas de doute ou d'indisponibilité de cette application, contacter le laboratoire).

D'autres analyses sont à prélever de préférence au laboratoire, ou si prélevées à l'extérieur, elles doivent être **rapidement transmises au laboratoire** :

✓ **Dans les 2h** :

- Prélèvements articulaires / LCR
- Expectorations (*sauf si conservation **entre 2 et 8°C → 24h***)
- Vancomycine
- Ammoniémie **entre 2°C et 8°C**
- Héparinémie (= AXA) non fractionnée (*sauf si **tube CTAD → 6h***)
- Prélèvement Paludisme

✓ **Dans les 4h** :

- Ecouvillon pour Recherche rapide de streptocoques du groupe B
- CK MB
- VRS
- Prélèvement conjonctival, ORL (*sauf si **e-Swab → 24h***)
- Liquide de ponction (*sauf LCR / 2h*)
- Selles pour parasitologie
- Urines pour ECBU non transférées sur conservateur
- Calcitonine
- Facteurs de coagulation
- ACC
- MNI (*sauf si conservation **entre 2 et 8°C → 48h***)
- ACTH (*sauf si conservation **entre 2 et 8°C → 24h***)
- Vitesse de sédimentation (VS)

✓ **Dans les 6h** :

- Facteurs VIII et Willebrand
- Héparinémie (= AXA) HBPM
- Acide lactique
- ARNc
- Potassium / ionogramme
- LDH
- TCA, *sauf patient sous HNF (calciparine, héparine) → 2h, sauf si tube CTAD → 6h*

Les autres examens sont pour la plupart stables au moins 8 heures.

5.1.2.2 Les urines

❖ Les urines pour ECBU

Prélèvement de préférence sur les premières urines du matin, ou à défaut, plus de 4 heures après les urines précédentes.

1. Pratiquer une toilette soignée de la vulve et du méat urétral avec une lingette imprégnée de Dakin ou de l'eau savonneuse suivie de rinçage.
2. Le début de la miction doit être éliminé. Seul le 2^{ème} jet sera recueilli (sauf prescription contraire).
3. Pour éviter au maximum la multiplication indésirable des germes entre la miction et son traitement au laboratoire, **transférer dès que possible** (dans l'idéal dans les 15 minutes) l'urine recueillie dans le flacon vers un tube avec conservateur selon les modalités suivantes :

RECUEIL D'URINE POUR ECBU
Instructions d'utilisation d'un flacon avec prise sous-vide

1^{ère} étape : Le recueil À domicile

Se laver soigneusement les mains

Procéder à une toilette intime avec 1 lingette nettoyante

Déboucher le flacon Poser le bouchon à l'envers sur une surface propre Ne pas toucher l'intérieur du flacon ou du bouchon

a. Commencer à uriner le 1^{er} jet dans les toilettes
b. Puis dans le flacon sans dépasser le niveau « MAX »

Revisser le bouchon

Passer à l'étape 2 uniquement si le flacon contient **20 mL d'urines au minimum.**
⚠ Si volume inférieur à 20 mL : Conserver au réfrigérateur et déposer dans les 4 heures

2^{ème} étape : La stabilisation par le patient ou professionnel de santé rapidement après le recueil

⚠ Indiquer vos **NOM, Prénom et Date de naissance** sur le flacon et le tube

Agiter doucement le flacon

Soulever partiellement l'étiquette protectrice Ne pas l'enlever complètement

Utiliser le tube sous-vide C&S Boric Acid du kit Remplissage jusqu'au trait « Min. »

Insérer le tube sous-vide en exerçant une pression suffisante Maintenir le tube en position jusqu'à son remplissage complet

Retirer le tube et recoller entièrement l'étiquette protectrice


Pour le tube contenant de l'acide borique : Retourner délicatement 8 à 10 fois
Donner au laboratoire le flacon + le tube Obligatoirement

x 8 - 10

Le tube doit être rempli au moins jusqu'au niveau indiqué sur le tube, sinon il sera inutilisable :



Dans le cas d'un patient sondé, le tube avec conservateur peut être adapté sur le système de prélèvement sanguin classique

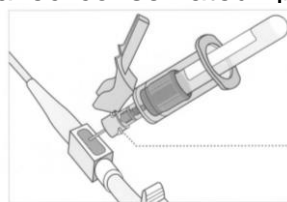

Ne pas oublier **l'étiquetage correct du prélèvement** et les **renseignements à compléter au dos** de la **fiche accompagnatrice** (*questionnaire à remplir impérativement*).

- ❖ **Les échantillons d'urines pour chimie** (Albumine, Sucre ...) : Seuls les flacons sont utilisés ⇒ étiquetage complet + fiche de renseignements.
- ❖ **Les échantillons d'urines pour recherche de Chlamydiae et Mycoplasmes** : ne pas avoir uriné depuis au moins 1 heure – Recueillir **seulement 10 à 30 ml** du 1^{er} jet d'urine dans un flacon à ECBU (si prescription d'un ECBU en même temps, utiliser 2 flacons et bien les identifier (1^{er} jet / 2^{ème} jet)).
- ❖ **Les échantillons d'urines pour recherche de toxiques** :
Pour la Commission de Permis de conduire, le recueil est à faire **exclusivement** au laboratoire. **Tout prélèvement extérieur au laboratoire sera refusé.**
- ❖ **Les échantillons d'urines pour recherche de cotinine urinaire** :
Transport entre 2 et 8°C (pas de transport à température ambiante).
Si transport impossible entre 2 et 8°C : le patient devra faire le recueil au laboratoire.
- ❖ **Les échantillons d'urines pour recherche de Mycobactérie (BK) urinaire (1 ou 3 kit(s) selon prescription)** :
 1. Identifier le flacon de 500ml (type débit HLM)
 2. Recueillir la totalité des premières urines du matin
 3. Faire acheminer le flacon le jour même au laboratoire
 4. Si demande de BK sur 3 jours (sur prescription médicale), répéter les étapes 1, 2 et 3 trois jours de suite (1 flacon par jour)

❖ **Les échantillons pour DHLM** (= compte d'Addis)

Utiliser un flacon de 500ml. Pour le recueil le patient doit :

1. Au lever, vider sa vessie
2. Boire un grand verre d'eau (au moins 200ml) / noter la date et l'heure sur le flacon
3. Se recoucher et rester allongé au repos pendant 3h
4. Uriner aussitôt dans le flacon (récupérer aussi les urines éventuellement produites avant la fin des 3h)

❖ **Les échantillons pour urines des 24h :**

Il est recommandé aux professionnels de santé de demander aux patients **de bien respecter les durées de recueil**. En cas de durée inférieure à 24h, noter **impérativement la durée réelle** (12h, 18h ...) sur la fiche de renseignements. Il est important que la totalité des urines soit recueillie et transmise au laboratoire.

⇒ En cas de diurèse élevée, ne pas hésiter à entamer un second flacon.

*Remarque : Certaines recherches peuvent nécessiter des **régimes spéciaux** avant le recueil (exemple : recherche de Porphyrines ; liste des analyses sur le site internet Bioxa.fr).*

5.1.2.3 Autres prélèvements bactériologiques

Utiliser le matériel adapté au type de prélèvement.

❖ **Les hémocultures :**

- **L'asepsie doit être rigoureusement respectée**
- Retirer la capsule avec l'ongle et désinfecter le bouchon des flacons à la Bétadine.
- Asepsie soignée de la peau avec de la Bétadine alcoolique (ou Chlorexidine ou alcool).
- Relier l'adaptateur BacT/Alert à l'ailette en vissant bien.
- Prélever du sang à l'aide du matériel de prélèvement en plaçant directement chaque flacon dans le corps de l'adaptateur BacT/Alert (il n'y a pas besoin de réintroduire de l'air dans les flacons, ils sont prévus pour cet usage) :
 - en 1^{er} : flacon aérobie → bouchon vert
 - en 2^{ème} : flacon anaérobie → bouchon orange

NB : Si hémoculture pédiatrique, prélever un seul flacon à hémoculture pédiatrique (bouchon jaune) pour les enfants de – de 13kg.

- Volume minimum :
 - Adulte : au minimum 5 ml par flacon et au maximum 10 ml par flacon ; **la notion de volume est très importante pour les hémocultures**
 - **Proscrire les hémocultures solitaires. Le volume nécessaire à la sensibilité de détection est de 40 à 60 mL par épisode, donc au moins 2 hémocultures et idéalement 3.**

■ Volume de remplissage pour les adultes

10 ml par flacon



Utiliser le repère visuel de 10 ml

■ Volume de remplissage pour les enfants



Poids de l'enfant	Flacon à prélever	Volume de sang / flacon	Nombre de flacons
<1 kg	Flacon pédiatrique (1 graduation = 4ml)	0.5 à 2 ml	1
1-1.2 kg		1.5 à 4.5 ml	1
2.1 -12.9 kg		3 à 6 ml	1

- Agiter immédiatement pour mélanger le sang au bouillon qui contient de l'anticoagulant.
- Sur les flacons, noter : l'identité du patient, le numéro de l'hémoculture, la date et l'heure ; si plusieurs temps de prélèvement, bien identifier les temps ou les heures sur les flacons. **Ne pas recouvrir le code-barres du flacon** (= n° lot et date de péremption du flacon) **ni la zone de lecture du volume** :



ZONE D'ETIQUETAGE

ZONE INTERDITE A L'ETIQUETAGE



Zone de lecture du volume

- Sur la fiche de renseignements, noter : l'identité du patient, le nom du préleveur, l'heure, la date, la température, le numéro de l'hémoculture, antibiotiques éventuels, frissons, recherche orientée (Brucellose, Leptospirose).
- En cas de bilan associé à l'hémoculture, prélever les hémocultures en premier, puis placer le réducteur dans l'adaptateur et prélever les tubes.
- Les hémocultures sont à transmettre au laboratoire dans les meilleurs délais.




- ❖ **Les frottis de dépistage et les HPV** : prélever au niveau de la jonction entre l'endocol et l'exocol avec la cytobrosse ; décharger dans le milieu liquide (cf. Annexe 3).
Eviter au possible l'utilisation de lubrifiants et s'assurer de l'absence de traitements (oraux ou locaux)

- Compléter la fiche de renseignement en précisant le contexte clinique
- Les échantillons hémorragiques ne sont pas recommandés
- Les milieux se conservent à température ambiante.

- ❖ **Prélèvements nasopharyngés COVID** :

- Mettre une surblouse, un masque FFP2, des lunettes de protection. Se laver les mains à la solution hydro alcoolique avant de mettre la première paire de gants.
- Emmener des gants, un kit de prélèvement adéquat, des lingettes désinfectantes.
- Identifier le tube.
- Mettre la deuxième paire de gants et procéder au prélèvement :

- Maintenir la tête du patient inclinée en arrière
- **Insérer l'écouvillon dans la narine**, et le pousser délicatement le plus loin possible, parallèlement au palais (cf. *schéma 1*)
- **Le laisser en place quelques secondes** puis le retirer lentement en lui imprimant un léger mouvement rotatif

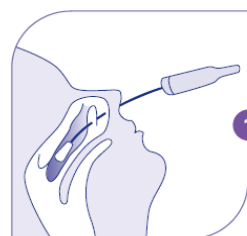

- **L'écouvillon** est ensuite **plongé** dans le milieu de transport
- **Bien décharger** l'écouvillon dans le milieu de transport puis **retirer** l'écouvillon et l'éliminer dans les déchets à risque infectieux

- Passer une lingette désinfectante sur le tube.
- Laisser tomber le tube dans le sachet de transport avec absorbant et refermer le sachet.
- Oter la deuxième paire de gants et la jeter dans la poubelle jaune avec la lingette désinfectante.



- Mettre la **fiche de renseignements remplie** dans la poche extérieure du sachet.
- Conserver le prélèvement entre 2 et 8°C avant de le transmettre au laboratoire.
- Après les prélèvements, désinfecter les lunettes en les aspergeant de désinfectant en spray (temps de contact doit être de 15 minutes). Procéder ensuite au déshabillage en prenant soin de terminer par les gants puis une friction avec de la solution hydroalcoolique.



- ❖ **Prélèvements salivaires COVID** :

Se rapprocher du laboratoire pour connaître les modalités (SEL – ENR/PRE/034).

5.1.3 Identification des échantillons

L'identité complète des patients doit être vérifiée et **rapportée sur les fiches de renseignements / bons cliniques** accompagnant les prélèvements. L'étiquetage ou l'identification manuscrite des échantillons est à faire **après le prélèvement**.

Remarque : Certains patients déjà connus du laboratoire disposent d'étiquettes pré-imprimées envoyées avec leurs résultats : dans ce cas, contrôler l'exactitude des étiquettes avec le patient (attention au cas où plusieurs membres de la famille ont des étiquettes), **ajouter la date de naissance sur les tubes étiquetés**, et éliminer les étiquettes non utilisées après chaque prélèvement.

Dans les autres cas, l'identification est faite manuellement, de manière soignée et lisible, et doit comprendre **Nom d'usage, Prénom, Date de naissance**. Le **Nom de naissance doit être également mentionné en cas de groupe sanguin / RAI**.

Remarque : En cas d'homonymie sur le nom (cas de couples, de frères et sœurs, etc.), il est recommandé de souligner (en rouge) ou de surligner les prénoms sur les tubes comme sur les fiches de transmission.

Dans tous les cas de prélèvement bactériologique, l'étiquetage des prélèvements devra être complet = nom d'usage, prénom, site de prélèvement.

5.1.4 Renseignements et documents d'accompagnement des prélèvements

Les prélèvements doivent toujours être accompagnés :

- ✓ De **l'ordonnance** s'il y en a une (s'il s'agit d'une **ordonnance renouvelable** déjà au laboratoire, et/ou s'il y a plusieurs ordonnances, **l'indiquer**) ;
- ✓ De la **feuille de renseignements** fournie, **remplie le plus complètement possible** :
 - **Identité** complète du **patient** (nom d'usage **et** nom de naissance) et coordonnées, Cas des groupes sanguins, RAI : Pour attester de la vérification de l'identité du patient à l'aide d'une pièce officielle **avec photo**, **remplir la partie prévue pour la vérification de l'identité**.
 - Poids si l'analyse le nécessite (créatinine...),
 - Etat de jeûne,
 - Coordonnées d'assuré social,
 - Nom du prescripteur,
 - **Nom et Prénom du préleveur** (+ téléphone portable si IDE remplaçant),
 - **Date et heure de prélèvement**.
 - **Renseignements cliniques** liés à l'analyse demandée : certains examens nécessitent de connaître des renseignements particuliers :
 - Les traitements (Anticoagulants, Dosage de médicaments tels que Lithium, Dépakine, Tégretol, Théophylline, Digoxine ...) :
 - Préciser Date et heure de la dernière prise
 - Date et heure du prélèvement
 - Posologie
 - La date des dernières règles (HCG...)
 - La réalisation d'une transfusion dans les 4 derniers mois
 - Toute information utile sur le statut pathologique du patient

- Cocher la nature du prélèvement (sang, urine, autre) et indiquer le nombre total d'échantillons
 - Conditions de communication des résultats : pour une transmission par internet, renseigner l'adresse mail et le téléphone portable du patient ; pour résultats sur DMP, cocher la case correspondante.
- ✓ Pour certaines analyses particulières, il est nécessaire de faire remplir au patient un consentement ou une feuille de renseignements supplémentaire au moment du prélèvement. Cela est indiqué dans la liste détaillée des examens du laboratoire disponible sur l'application mobile Bioxa. Ces documents sont à demander au laboratoire avant le prélèvement, ou à télécharger sur le site internet Bioxa.fr.
- ✓ Enfin, en cas d'analyse hors nomenclature (indiquée sur l'application mobile Bioxa ou sur simple appel au laboratoire), ou en cas d'analyse sans ordonnance, le préleveur doit recueillir l'accord du patient concernant la facturation de son analyse (*pour cela, demander au laboratoire un formulaire (ou le télécharger sur le site internet Bioxa.fr – « Contrat patient »*)).

5.1.5 Cas des Groupe sanguin / RAI

Avant de réaliser le/les prélèvements de déterminations de groupe sanguin :

Demander au patient s'il possède une carte de groupe sanguin.

Si la carte de groupe sanguin est antérieure à Septembre 2009 ou réalisée en dehors de la région Grand-Est elle sera considérée comme non recevable → Deux déterminations devront être effectuées à nouveau pour obtenir une carte de groupe sanguin complète et conforme.

Vérifier l'identité du patient **obligatoirement et uniquement sur document officiel d'identité** avec photo pour les déterminations groupes sanguins et RAI :

- Carte d'identité
- Passeport
- Carte de séjour



NB : la carte vitale n'est pas une pièce d'identité, de nombreuses erreurs ont déjà été constatées.

L'intégralité des renseignements suivants est exigée :

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> – NOM DE NAISSANCE – NOM D'USAGE – PRENOM – DATE DE NAISSANCE – SEXE | } | sur tube <u>ET</u> fiche de renseignements |
| <ul style="list-style-type: none"> – ADRESSE – NOM ET PRENOM DU PRELEVEUR | } | sur fiche de renseignements |

Cocher la case « identité vérifiée », si la case n'est pas cochée le laboratoire vous contactera systématiquement.

Les RAI sont ajoutées systématiquement avec la prescription « groupe sanguin 1ère et 2ème détermination » ou « groupe sanguin » pour les cas suivants :

- Femme enceinte
- Patient dans un contexte transfusionnel avéré (anémie mal tolérée, acte chirurgical à prévision hémorragique, première transfusion dans un contexte d'urgence).

Les Recherches d'Agglutinines régulières (RAI) se font exclusivement sur tube EDTA (violet).



Quand prélever une ou deux déterminations ?

- Prélever **2 déterminations** : en l'absence de carte de groupe valide, pour l'obtention d'une carte de groupe sanguin complète, la prescription doit comporter systématiquement : « 2 déterminations de groupe sanguin » ou « 1ère et 2ème détermination de groupe sanguin ».
- En l'absence de cette précision, 1 seule détermination sera saisie.

Comment prélever une 2^{ème} détermination :

Si la prescription précise « 2 déterminations de groupe sanguin » ou « 1ère et 2ème détermination de groupe sanguin », il convient de faire un **2^{ème} prélèvement** :

- **Prendre une 2^{ème} boîte / un 2^{ème} sachet** et reprélever le patient,
- Revérifier et réinscrire les coordonnées complètes sur le tube et la fiche en précisant « 2^{ème} détermination ». **Indiquer l'heure de prélèvement, différente du premier prélèvement.**

5.1.6 Hygiène et sécurité

Une fois le prélèvement effectué, **jeter l'aiguille et tout matériel de prélèvement souillé** dans un réceptacle adéquat (container jaune). **Ce container devra être éliminé, selon les normes en vigueur, en tant que Déchets d'Activité de Soins à Risques Infectieux (DASRI).**

🚫 Ne pas laisser l'aiguille dans le sachet ou la boîte de prélèvement.

5.2 Conservation des prélèvements avant leur prise en charge par le laboratoire

Avant transmission au laboratoire (par un agent de liaison ou dépôt sur site), **les prélèvements doivent être conservés selon les modalités suivantes :**

5.2.1 Prélèvements sanguins

- Pas d'excès de température (ni trop chaud, ni trop froid) : Le stockage des tubes prélevés doit être réalisé entre 15 et 25°C. **Ne pas stocker les prélèvements sanguins au réfrigérateur** (sauf exigence particulière spécifiée).
- Durée idéale : inférieure ou égale à 8h (sauf exceptions § 5.1.2.1.4).
- Conserver et transporter les tubes en **position verticale** (notamment pour éviter l'hémolyse et la présence de fibrine dans les tubes secs).

5.2.2 Urines

ECBU : les échantillons transférés dans les tubes avec conservateur peuvent être conservés à température ambiante, jusqu'à 24 heures. *Dans le cas contraire, les urines doivent être conservées au froid et transmises dans les 4h suivant le recueil.*

Echantillons d'urines pour autres examens : ils doivent être conservés à température raisonnable (< 25°C) ; le froid n'est pas gênant. Eviter les fortes chaleurs (concentration, fermentation). Transport au laboratoire dans les 8h en moyenne / variable selon analyse.



5.2.3 Selles


- Conservation **entre 2 et 8°C**
- Transmission dans les 12h pour coproculture, 8h pour recherche de sang, 4h pour parasitologie, 5 jours pour le TDIF (recherche de *Clostridium difficile*).

5.2.4 Prélèvements bactériologiques (génitaux, pus...)

- Conservation entre 15 et 25°C
- Prélèvement avec écouvillon e-Swab : jusqu'à 24 heures.

5.2.5 Tableau récapitulatif des délais de transmission

Analyse	Température de conservation*	Délai optimal*	Délai maximum acceptable*
Prélèvements sanguins	15 à 25°C	6h	8h (sauf analyses particulières, cf. page 10)
ECBU (avec tube conservateur)	15 à 25° (2 à 8°C acceptable)	6h	24h
Flacon ECBU seul	2 à 8°C	4h	
 Cotinine	2 à 8°C	48h	
Autres urines	15 à 25°C (2 à 8°C acceptable)	6h	12h
Selles	2 à 8°C	4h	8h
 Hémocultures	15 à 25°C	< 24h	
Prélèvements bactériologiques sur e-Swab type génitaux, pus...	15 à 25°C	< 24h	
Autres prélèvements bactériologiques type liquide de ponction	15 à 25°C	Max 4h (sauf LCR / 2h)	
Expectorations (Crachats)	2 à 8°C	< 24h	
	15 à 25°C	2h	
COVID-PCR	2 à 8°C 15 à 25°C si transmission immédiate	< 24h	

 * sauf exigence contraire ⇒ cf. [Application mobile Bioxa](#).

5.3 Transmission au laboratoire

Toute **urgence** doit être **clairement signalée** (sur la boîte / le sachet, ou oralement lors du dépôt), et **transmise dans l'heure** au laboratoire (ou à l'agent de liaison pour les correspondants en ramassage comme décrit ci-après).

Si ce n'est pas possible, le patient doit être orienté directement vers le laboratoire (le site Bezannes assure une garde 24h/24, 7jours/7) ou un service d'urgence.

A considérer comme urgent :

- ↳ Une urgence médicale (spécifiée sur la prescription)
- ↳ Une urgence technique = examens à délai de conservation court spécifiés § 5.1.2.1.4 ou [sur l'application mobile Bioxa](#)

Le laboratoire organise des tournées régulières (excepté les dimanches et jours fériés) pour reprendre les prélèvements à certains points de passage, et les acheminer au laboratoire dans des **délais raisonnables** par rapport à l'éloignement du laboratoire, de manière à garantir le maintien de l'intégrité des échantillons.

Le transport des prélèvements par les agents de liaison est réalisé avec du matériel conforme à la législation en vigueur en matière de transport de matières dangereuses par route (réglementation ADR).

ANNEXE 1 : JO du 02/05/2002 - Décret 2002-660 du 30/04/2002

Prélèvements et transmission

La transmission des prélèvements biologiques est l'objet de dispositions qui ont été à diverses reprises modifiées - cf. article L.6211-5 du Code de la santé publique.

Précisément, cet article a été retouché par la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 qui a inséré un alinéa 2 ainsi libellé:

« *Toutefois, les prélèvements que sont habilités à effectuer les professionnels de santé, les établissements de santé et les centres de santé ne disposant pas de laboratoire d'analyses de biologie médicale peuvent être transmis aux laboratoires d'analyses de biologie médicale, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.* »

Le décret n° 2002-660 du 30 avril 2002, répondant à l'invitation du législateur, vient de déterminer les conditions relatives :

- à la « parfaite » identification des prélèvements ;
- à l'obligation d'accompagner l'échantillon biologique :
 - de la prescription des actes,
 - d'une « fiche » dont la présentation est fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé ;
- à l'accompagner d'une « fiche de suivi médical » (facultative) si le prescripteur de l'acte le juge utile à la « réalisation » et à l'« interprétation » de l'analyse. Cette fiche comporte des renseignements relatifs aux patients.

Enfin, les « procédures » dont les LABM récepteurs des échantillons doivent se doter en vertu du GBEA sont précisées, de même que la « traçabilité » et l'« archivage ».

Décret n° 2002-660 du 30 avril 2002 relatif aux conditions de transmission de prélèvements biologiques aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et modifiant le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale.

Art. 1^{er}. – Il est inséré dans le décret du 4 novembre 1976 susvisé un article 20-5 ainsi rédigé :


« Art. 20-5.- Les prélèvements destinés à être transmis à un laboratoire de biologie médicale effectués par les professionnels de santé, y compris ceux exerçant au sein des établissements et des centres de santé ne disposant pas de laboratoire d'analyses de biologie médicale, doivent être parfaitement identifiés. Ils le sont par le nom patronymique, le nom marital ou usuel, le prénom, la date de naissance et le sexe du patient, mentionnés par le professionnel de santé au moment du prélèvement. Ce dernier spécifie son nom et précise la date et l'heure du prélèvement.

L'échantillon biologique prélevé est transmis au laboratoire accompagné de la prescription des actes et d'une fiche, dont la présentation est fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé. L'échantillon biologique est également accompagné, si le prescripteur ou le biologiste l'estime utile, d'une fiche de suivi médical comportant les renseignements relatifs au patient et utiles à la réalisation et l'interprétation de l'analyse. Ces fiches peuvent être transmises par voie électronique.

Les personnes impliquées dans le prélèvement et sa transmission se conforment aux procédures que le laboratoire qui réceptionne l'échantillon a établies en application des dispositions du guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale.

Le directeur ou le directeur adjoint du laboratoire à qui a été transmis l'échantillon le refuse s'il n'est pas conforme aux procédures précitées. Il en informe le prescripteur et le professionnel de santé qui a effectué le prélèvement. Il définit par écrit une procédure de traçabilité et assure l'archivage des fiches pendant au moins trois ans. »


ANNEXE 2 : Mode d'emploi des E-SWAB

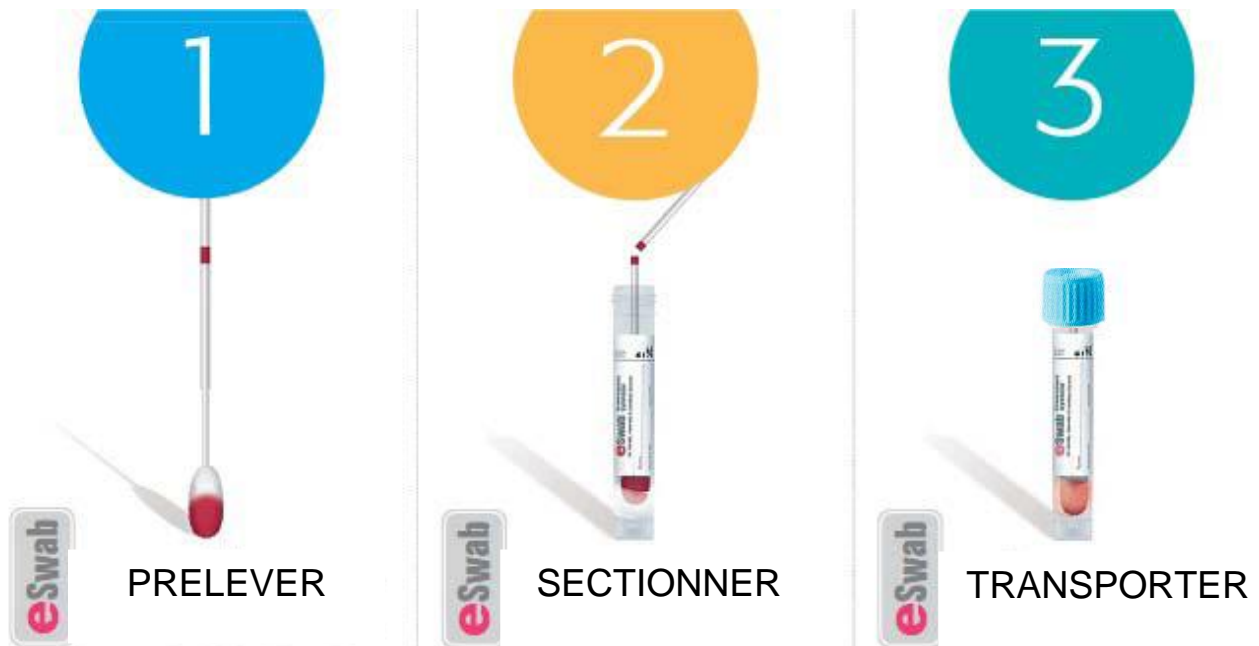

LA VERSION ELECTRONIQUE

ANNEXE 3 : Prélèvement pour recherche de papillomavirus oncogènes (HPV) et/ou frottis cervico utérin

1- Pose du speculum et prélèvement :

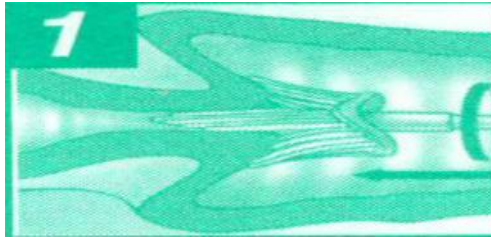

- S'il n'existe pas de contre-indication (mettre en place un speculum de façon à permettre un contrôle visuel optimal du site de prélèvement, c'est à dire la zone de jonction entre l'endocol et l'exocol.
- Si les glaires sont abondantes, moucher le col à l'aide d'une première brosse qui sera aussitôt éliminée.
- Insérer la pointe de la cytobrosse destinée au prélèvement dans le canal endocervical, assez profondément pour que les poils les plus courts soient en contact avec l'exocol, et opérer 5 fois une rotation de 360° dans le sens des aiguilles d'une montre.

2- Déchargement de la cytobrosse :



- Décharger immédiatement le prélèvement dans le milieu de conservation et de transport en immergeant puis en appuyant 10 fois les poils de la cytobrosse au fond du flacon.
- Tenir enfin la cytobrosse entre le pouce et l'index et la faire tourner vigoureusement pour libérer un maximum de matériel cellulaire.
- Jeter le dispositif de prélèvement (ne pas laisser la tête de la brosse dans le flacon).

3- Fermeture étanche du milieu de conservation et de transport :



- Visser le bouchon puis **serrer en s'assurant que les deux marquages noirs** (flacon – bouchon) **se chevauchent légèrement** (assure une bonne étanchéité).

ANNEXE 4 : Ordre de prélèvement

Avec une aiguille (ponction franche)



ORDRE DE PRELEVEMENT

SECTEURS ANALYTIQUES

**HEMOSTASE
+
Dosage
PLAQUETTES
sur citrate**



Tube citraté BLEU (2,7ml ou 1,8ml)
→ plasma citraté ou plaquettes sur citrate



Tube CTAD BLEU (pour dosage TCA ou AXA sous HNF)
→ plasma citraté spécifique, stabilité augmentée
→ **sur commande**

**ALLERGIE
BIOCHIMIE
AUTO-IMMUNITE
PHARMACOLOGIE
SEROLOGIE
INFECTIEUSES**



Tube sec gel JAUNE → sérum avec séparateur

PHARMACOLOGIE



Tube sec ROUGE → sérum sans séparateur

CYTOGENETIQUE



Tube héparine VERT sans gel
→ sang total hépariné, plasma hépariné sans séparateur

BIOCHIMIE

Tubes dédiés pour certains correspondants



Tube héparine VERT avec gel → plasma hépariné avec séparateur

**HEMATOLOGIE
IMMUNO-
HEMATOLOGIE
(RAI, groupe,
Coombs, etc.)
BNP, PTH, HbA1c**



Tube EDTA VIOLET → sang total ou plasma EDTA

**GLYCEMIE,
HGPO
LACTATE**



Tube Fluorure GRIS → sang total ou plasma fluoré

DIVERS



Autres



Héparine de Sodium



ACD




EDTA+ Aprotinine

→ Cf. Application BIOXA
→ Tubes disponibles sur Commande uniquement.

Avec un système à ailettes



ou

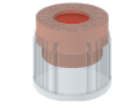

Tube neutre (sans additif)

OU Si prescription hémocultures :



Aérobie en 1er



Anaérobie en 2ème


ORDRE DE PRELEVEMENT

SECTEURS ANALYTIQUES

HEMOSTASE + Dosage PLAQUETTES sur citrate



Tube citraté BLEU (2,7ml ou 1,8ml)
→ plasma citraté ou plaquettes sur citrate

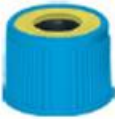

Tube CTAD BLEU (pour dosage TCA ou AXA sous HNF)
→ plasma citraté spécifique, stabilité augmentée
→ sur commande

**ALLERGIE
BIOCHIMIE
AUTO-IMMUNITE
PHARMACOLOGIE
SEROLOGIE
INFECTIEUSES**



Tube sec gel JAUNE → sérum avec séparateur

PHARMACOLOGIE



Tube sec ROUGE → sérum sans séparateur

CYTOGENETIQUE



Tube héparine VERT sans gel
→ sang total hépariné, plasma hépariné sans séparateur

BIOCHIMIE
Tubes dédiés pour certains correspondants



Tube héparine VERT avec gel → plasma hépariné avec séparateur

**HEMATOLOGIE
IMMUNO-
HEMATOLOGIE (RAI, groupe, Coombs, etc.)
BNP, PTH, HbA1c**



Tube EDTA VIOLET → sang total ou plasma EDTA

**GLYCEMIE,
HGPO
LACTATE**



Tube Fluorure GRIS → sang total ou plasma fluoré

DIVERS



Autres



Héparine de Sodium



ACD



EDTA + Aprotinine

→ Cf. Application BIOXA
→ Tubes disponibles sur Commande uniquement.